



CINTA DE APOIO LOMBAR

PRO COMFORT

PR-1273



Manual de instruções

Este produto está em conformidade com a Directiva 93/42/CEE relativa a produtos medicinais.

Manual de instruções

Conteúdo da embalagem	4
Dados técnicos	4
Símbolos utilizados	4
Utilização	4 - 5
Instruções de segurança	5
Colocação da protecção elástica	6
Limpeza e cuidado	7
Instruções para a eliminação	7
3 anos de Garantia	7
Serviço	8



Antes de utilizar, leia atentamente o manual de instruções.
Mantenha-o guardado para uma posterior consulta!
Ao ceder o artigo a terceiros, entregue também este manual de instruções.

Conteúdo da embalagem

1 x Manual de instruções

1 x Cinta de apoio lombar inclui 2 pelotas lombares e cinto de compressão

Dados técnicos

Perímetro da cintura:

XS - M 66 - 82 cm

M - L 80 - 98 cm

L - XXL 96 - 116 cm

Símbolos utilizados



Respeitar o manual de instruções



Data de fabrico



Designação do lote



Fabricante

Utilização

Este artigo foi concebido para o uso privado e não pode ser usado durante mais de 2-3 horas sem interrupção nem mais do que 6 a 8 horas diariamente.

Para uma utilização auxiliar em caso de:

1. Dores na parte inferior da coluna vertebral (região lombar, coluna lombar)
2. Desgaste das pequenas articulações vertebrais (síndrome facetária lombar)
3. Tensões musculares
4. Sobrecarga desportiva e corporal
5. Movimento exagerado da coluna lombar

Não utilizar ou utilizar apenas depois de consultar o seu médico em caso de:

1. Instabilidade de alto grau da coluna lombar
2. Ferimentos exteriores
3. Deficiências neurológicas (dores nervosas difundidas ou paralisias na extremidade inferior)
4. Problemas na circulação sanguínea



Instruções de segurança **Perigo de ferimento!**


- Se surgirem problemas durante a respectiva utilização, tire imediatamente a ligadura e consulte um médico.
- Coloque a ligadura de maneira a que a sua circulação sanguínea não seja afectada.
- Antes de a utilizar, verifique a ligadura em relação a rasgos ou danos.
- O artigo só pode ser utilizado se estiver em bom estado.
- Não utilize a ligadura durante o sono nem durante fases de repouso maiores, como por ex., ao permanecer sentado durante mais tempo.

Perigo de inflamações e irritações cutâneas!

- Nalguns casos, poder-se-ão verificar reacções alérgicas cutâneas e inflamações.
- Não utilize o artigo durante mais do que 6 a 8 horas diariamente, nem mais do que 2 a 3 horas sem interrupção, e lave regularmente a zona coberta, a fim de evitar inflamações e irritações na pele.
- A fim de se evitarem reacções cutâneas, a pele deverá estar livre de géis, gorduras, pomadas, óleos ou outros materiais semelhantes. Se ainda assim surgirem problemas, consulte imediatamente um médico.


Colocação da protecção elástica

Pelotas lombares (opcionalmente removíveis) A ligadura está bem colocada, se as pelotas lombares se fizerem sentir sobre a parte superior das nádegas.

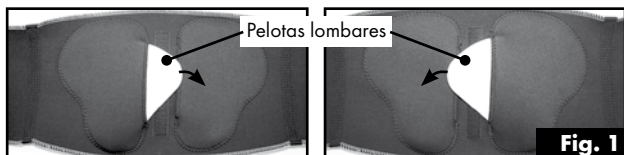

Cinto de compressão (opcionalmente removível através do fecho aderente)

Por intermédio do cinto de compressão, é alcançada uma estabilidade adicional na região da coluna lombar. Quanto maior for a pressão ao se colocar o cinto de compressão, maior é a estabilidade obtida.

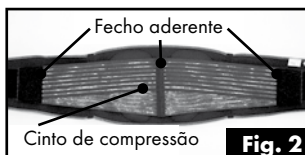

- 1** Antes de o colocar, desapeste os fechos aderentes laterais do cinto de compressão.
- 2** Feche o fecho aderente da ligadura. A ligadura deverá assentar confortavelmente e ligeiramente apertada.
- 3** Estique o cinto de compressão com ambas as mãos.
- 4** Feche consecutivamente os fechos aderentes laterais do cinto de compressão.



Limpeza e cuidado



- Antes da primeira utilização deve lavar bem a protecção elástica.
- Após cada duas ou três utilizações recomenda-se uma nova lavagem.
- Antes de a lavar aperte os fechos aderentes.
- Depois da lavagem deve passar a protecção elástica bem por água.
- Lavar em separado.

Instruções para a eliminação

Por favor elimine a embalagem e o artigo de forma amiga do ambiente e genuína! Elimine o artigo através de uma central de eliminação de resíduos certificada ou através da administração do seu município. Tome em atenção os protocolos em vigor.

3 anos de Garantia

O produto foi produzido com enorme cuidado e controlado continuamente. Este produto tem uma garantia de três anos a contar a partir da data de aquisição. Mantenha guardado o seu talão de compra. A garantia cobre apenas defeitos de material e de fabrico, e é anulada em caso de uso abusivo ou inadequado. Os seus direitos legais, em especial os direitos fundamentais do consumidor não são limitados por esta garantia. Em caso de reclamação de garantia entre em contacto com nossa central de serviço gratuito ou envie-nos um e-mail. Atendê-lo-emos pessoalmente em cada caso. Em caso de reclamação de garantia, pode enviar as peças defeituosas livre de franquia para o endereço de serviço indicado, depois de ter combinado com os nossos funcionários de serviço. Receberá então gratuitamente de volta, uma peça nova ou reparada.

O período de garantia não será prolongado devido às eventuais reparações no âmbito da garantia, garantia legal ou concessão de cortesia comercial. Isto também se aplica às peças substituídas e reparadas. As reparações necessárias após o término do período de garantia estão sujeitas a pagamento.

IAN: 63728

Serviço

Endereço de Serviço

☎ Linha de apoio ao cliente: 00800-88080808
(2.ª. a 6.ª. 10:00-16:00 horas, chamada gratuita)

Transportes Lurdes Amado • Rua Da Bregieira 7 Monte Redondo
PT-2425 Monte Real

pt@nws-service.com

- www.nws-service.com -

Impresso: 201106V1